


STAPPENPLAN

Uw CPAP-apparaat verbinden met uw wifinetwerk

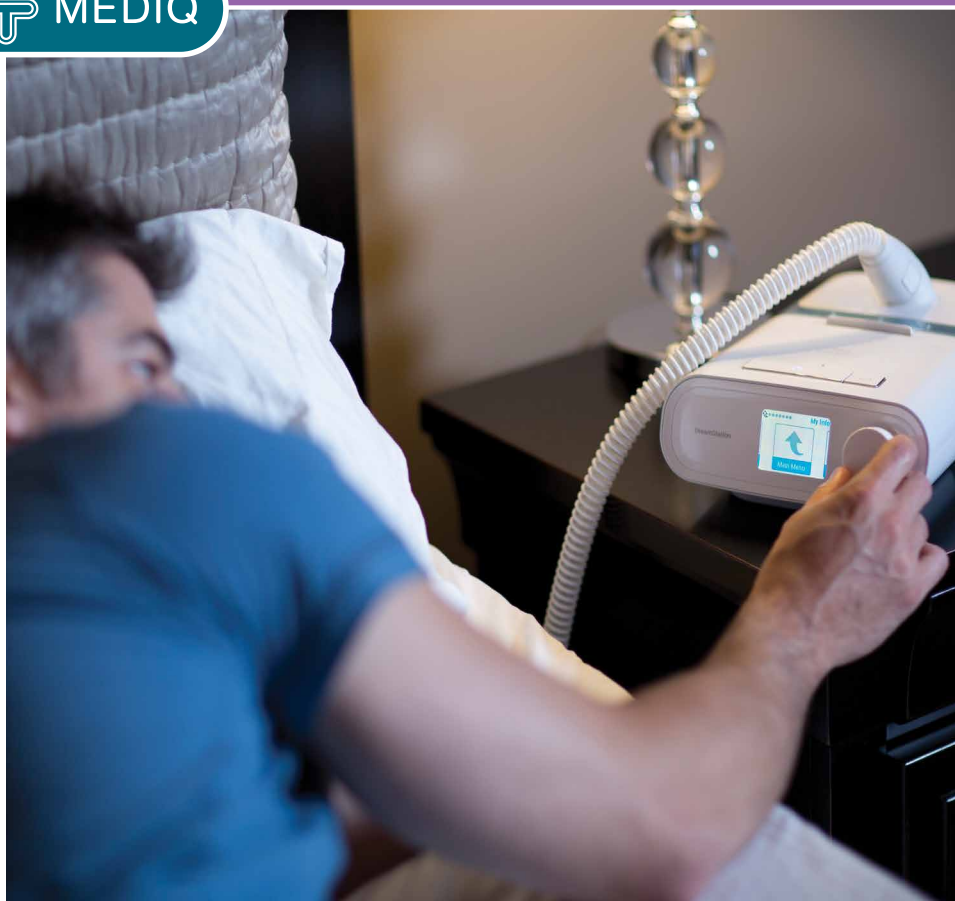

In dit stappenplan beschrijven wij hoe u eenvoudig uw CPAP-apparaat, de Philips DreamStation, kunt verbinden met uw wifinetwerk. Wanneer u verbinding heeft, kunt u automatisch uw therapiegegevens naar ons versturen. Eenvoudig, snel en veilig.

1

Ga naar 'mijn instellingen'

Ga met de draaiknop van uw CPAP-apparaat in het menu naar het 'mijn instellingen'-icoon, klik op de knop.



Mijn instellingen icoon

2

Ga naar het wifischerm

Draai vervolgens aan de knop totdat 'wifi' in het scherm verschijnt. Klik weer op de knop.

3

Wifinetwerk selecteren

Selecteer uw wifinetwerk en klik op de knop. Is uw netwerk niet zichtbaar? Kies dan onderaan de lijst voor de optie 'andere...'. Voer hier de naam van uw netwerk in.

4

Wachtwoord invoeren

Voer het wachtwoord van uw wifinetwerk in (indien nodig) en klik op het groene vinkje. Onderaan het scherm kunt u kiezen voor kleine letters of hoofdletters, cijfers, symbolen of 'X' selecteren om te annuleren. Zodra uw wachtwoord is ingevoerd, maakt de wifimodem in uw CPAP-apparaat een verbinding met uw wifinetwerk. Vanaf nu worden uw therapiegegevens dagelijks aan ons verstuurd.

5

Controleren wifiverbinding

Als u wilt controleren of u nog steeds verbinding heeft met uw wifinetwerk doet u dit door naar het 'mijn instellingen'-menu te gaan. In dit menu worden de netwerknaam en signaalsterkte getoond.*

Let op: het is belangrijk dat u 's ochtends wanneer u uw CPAP-apparaat uitzet, de stekker van het apparaat niet gelijk uit het stopcontact haalt. Het duurt een uur voordat uw therapiegegevens vanaf het apparaat aan ons verstuurd worden.

**Wanneer er een rode 'X' verschijnt over het pictogram van de signaalsterkte (📶), detecteert de wifimodem een draadloze router, maar kan de modem er geen verbinding mee maken. Doorloopt u in dit geval bovenstaande stappen 1 t/m 3 nog een keer. Let op dat u het juiste netwerk kiest en het juiste wachtwoord invoert.*